

Recuperador vascular


Indy OTW™

El recuperador vascular Indy OTW consiste en un asa de alambre de nitinol de 4 lazos fijada a un catéter interior (fijado proximalmente a una cánula metálica) y una vaina Flexor exterior. El dispositivo es compatible con guías de 0,035 pulgadas (0,89 mm) para introducción sobre guía.

La vaina Flexor tiene una banda radiopaca incorporada dentro del material de la vaina para identificar la ubicación de la punta distal de la vaina.

INDICACIONES

El recuperador vascular Indy OTW está indicado para atrapar cuerpos extraños y extraerlos hasta un lugar de la vasculatura periférica.

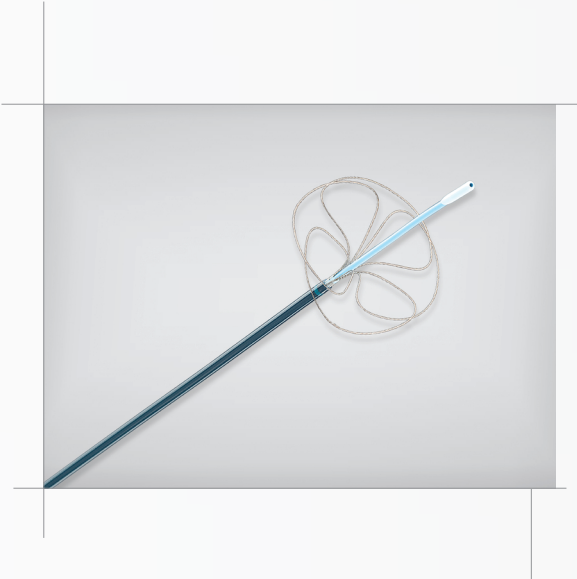

Número de Orden	Diámetro exterior de la Vaina Fr	Diámetro del Cable Guía que Acepta pulg	Longitud de la Vaina cm
INDY-8.0-35-55-40	8,0		55
INDY-8.0-35-100-40	8,0		100

INTERVENCIONISMO PERIFÉRICO

Contacto.

Diego Amigo Sordo
Gerente de Ventas
Intervencionismo Periférico y Radiología
email: diego.amigo@endomedica.com
móvil: 2272-6534