


Introductores para intubación Frova

(con adaptadores Rapid-Fit®)

El introductor para intubación Frova es un introductor de catéter radiopaco con marcas de centímetros y una punta roma y curvada que puede introducirse a ciegas en la tráquea. Los productos con el sufijo «-FII» en sus referencias también incluyen una cánula de refuerzo y dos adaptadores Rapi-Fit® para la conexión a un dispositivo de ventilación. Los productos con el sufijo «-FI» incluyen dos adaptadores Rapi-Fit® para la conexión a un dispositivo de ventilación, pero no una cánula de refuerzo.

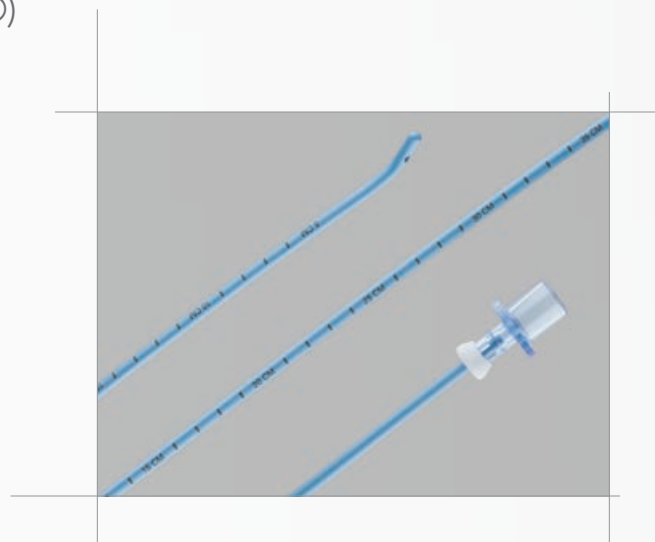

El introductor para intubación Frova está indicado para facilitar la intubación endotraqueal en pacientes en los que no pueda visualizarse adecuadamente la glotis.

El producto se ha diseñado para que lo utilicen médicos con formación y experiencia en técnicas de tratamiento de la vía aérea. Deben emplearse las técnicas habituales de colocación de catéteres de intubación.

Número de Orden	FR Catéter	Long. del Catéter (cm)	DI del Catéter (cm)	Para repuesto de los Tubos ET con DI (mm)
C-CAE-8.0-35-FII	8.0	35	1.6	3 o mayor
C-CAE-14.0-70-FII	14.0	70	3	6 o mayor

Contacto.

Izchel Lugo Aguirre
Gerente de Línea Cuidados Críticos, Cirugía
Urología y Terapia de Ondas de Choque
email: izchel.lugo@endomedica.com
móvil: 5990-2700

COOK®
MEDICAL

CUIDADOS
CRÍTICOS

ENDOMÉDICA
Tecnología para la salud

Apoyando a la comunidad médica desde 1986