


Recuperador vascular de 4 lazos

CloverSnare™

El recuperador vascular de 4 lazos CloverSnare consiste en cuatro pétalos compuestos de nitinol, para aportar memoria de forma, y tantalio, para aportar visibilidad. Está envasada con un sistema de vainas coaxiales con dilatador. Cada una de las vainas del sistema coaxial tiene bandas radiopacas incorporadas para identificar la ubicación de la punta distal de cada vaina.

El recuperador vascular de 4 lazos CloverSnare está indicado para utilizarse en el sistema cardiovascular a fin de manipular y recuperar objetos extraños, como, entre otros, guías, espirales, balones, catéteres y filtros.

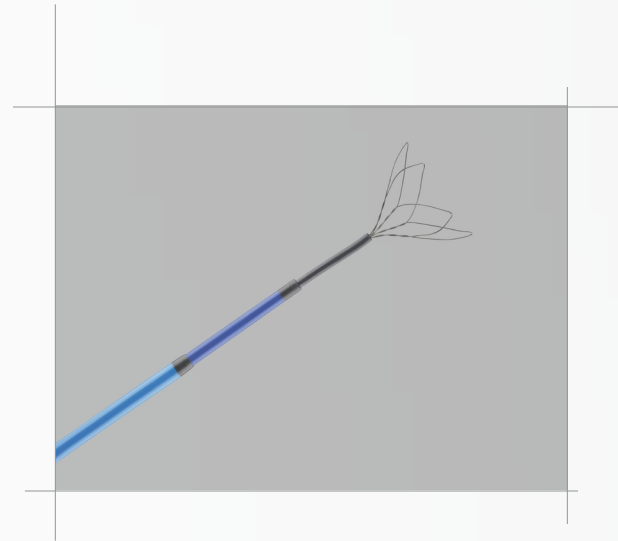

Femoral

Número de Orden

Catéter
Fr

Longitud
del catéter
cm

Vaina
introdutora
cm

VRS-6.0-90

60

90

85

INTERVENCIÓN
PERIFÉRICO

ENDOMÉDICA
Tecnología para la salud

Apoyando a la comunidad médica desde 1986

Contacto.

Diego Amigo Sordo
Gerente de Ventas
Intervencionismo Periférico y Radiología
email: diego.amigo@endomedica.com
móvil: 2272-6534

www.endomedica.com

| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Guad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)

COOK
MEDICAL