

Aguja de Localización de Lesiones Mamarias X-Reidy



CONOZCA MÁS DE ESTE PRODUCTO ESCANEANDO EL CÓDIGO QR

Destinado al marcado preoperatorio de lesiones mamarias no palpables.


El gancho en forma de X proporciona una excelente fijación y está diseñado para limitar la migración antes de la cirugía

La porción rígida de 3 cm de largo del eje se palpa fácilmente durante la cirugía

La porción de alambre suave y flexible del eje es cómoda para el paciente

El alambre reforzado es fácil de palpar localizar durante el procedimiento

El alambre reforzado está diseñado para reducir la posibilidad de cortar accidentalmente el alambre

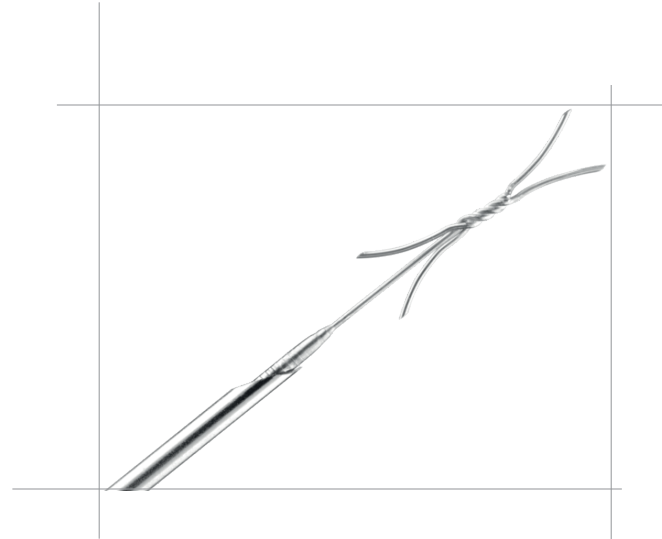

Disponible en dos calibres: 18G y 19.5G
Disponible en tres longitudes: 5 cm, 9 cm y 15 cm

Disponible en un juego

Suministrado estéril en paquetes despegables

Diseñado para un solo uso



AGUJA DE POSICIONAMIENTO DE DOS PARTES CON INTRODUCIDOR TROCAR



CARGA DE CÁNULA



ALAMBRE DE GANCHO



ALAMBRE DE GANCHO PRECARGADO EN CÁNULA DE CARGA

BREAST CARE

AGUJA

Número de Orden

Tamaño Calibre G

Longitud (cm)

DXRBL-19.5-5.0-S	19.5	5
DXRBL-19.5-9.0-S	19.5	9
DXRBL-19.5-15.0-S	19.5	15

SETS

Número de Orden

Tamaño Calibre G

Longitud (cm)

DXRBL-18-5.0	18	5
DXRBL-18-9.0	18V	9