
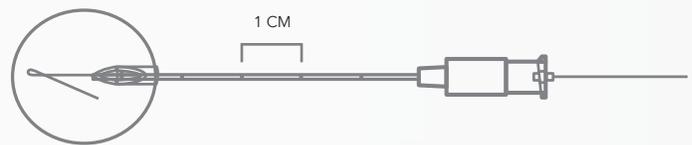


Aguja de Localización de Lesiones Mamarias Kopans

- Destinado al marcado preoperatorio de lesiones mamarias no palpables.
- El alambre de gancho de resorte actúa como un marcador para indicar la ubicación de la lesión.
- La marca de pulido de referencia, cuando es visible justo fuera del eje de la aguja en el alambre del gancho de resorte, proporciona una garantía visual de que el alambre del gancho está dentro de la punta de la aguja durante la manipulación de la aguja.
- La porción reforzada del alambre de gancho de resorte modificado sirve como un punto de referencia visual y palpable que ayuda al cirujano a medir la distancia a la lesión durante la disección y reduce el riesgo de cortar el alambre de gancho de resorte.
- Los modelos EchoTip® permiten una mejor visibilidad bajo ultrasonido.
- Disponible en dos calibres: 20G y 21G
- Disponible en cuatro longitudes: 5cm, 7cm, 9cm y 15cm
- Disponible con el modelo de aguja EchoTip®
- Suministrado estéril en paquetes despegables
- Diseñado para un solo uso

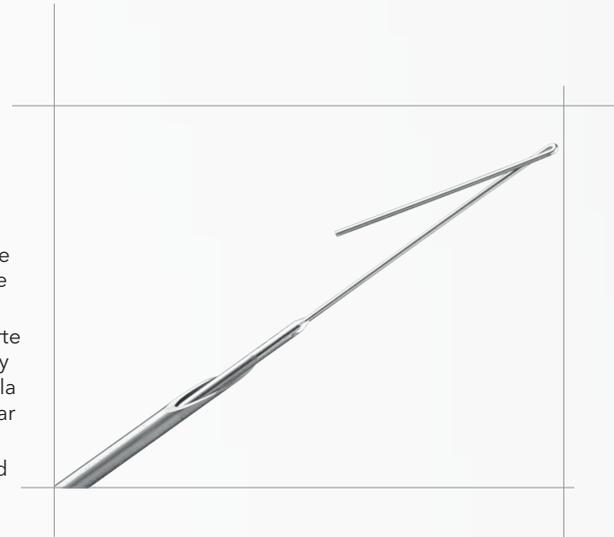

BREAST
CARE

AGUJA ESTÁNDAR		
Número de Orden	Tamaño Calibre G	Longitud (cm)
DKBL-20-5.0-A	20	5
DKBL-20-7.0-A	20	7
DKBL-20-9.0-A	20	9
DKBL-20-15.0-A	20	15
DKBL-21-5.0-A	21	5
DKBL-21-7.0-A	21	7
DKBL-21-9.0-A	21	9
DKBL-21-15.0-A	21	15

AGUJA CON ECHOTIP		
Número de Orden	Tamaño Calibre G	Longitud (cm)
DKBL-20-5.0-A-U	20	5
DKBL-20-7.0-A-U	20	7
DKBL-20-9.0-A-U	20	9
DKBL-21-5.0-A-U	21	5
DKBL-21-7.0-A-U	21	7
DKBL-21-9.0-A-U	21	9

Contacto.

Ana María Fernández
Subdirectora Comercial - Vascular
email: anamaria.fernandez@endomedica.com
oficina: 55-4738-8860

