


# Guía con punta calibrada

# Acrobat® 2

Acceso con guía:  
Rendimiento que usted puede medir.

- El diseño de muelle espiral hace que la punta sea una de las más flexibles disponibles, lo que facilita el acceso a estenosis difíciles y el desplazamiento por ellas
- Las marcas endoscópicas indican el movimiento de la guía y permiten realizar mediciones
- El revestimiento hidrofílico de 25 cm ofrece una lubricidad óptima, y el cuerpo de Teflon® proporciona un control táctil total
- El indicador de carga hacia atrás permite una transición suave hasta el dispositivo elegido siguiente

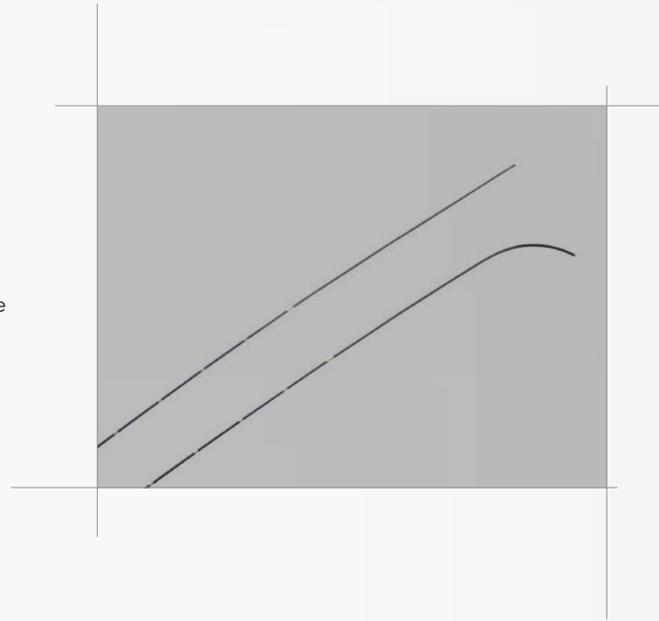

Para facilitar la canulación de los conductos biliar y pancreático, y el paso a través de estenosis difíciles durante la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada (ERCP).

Este dispositivo se suministra estéril, es desechable y está indicado para un solo uso.

## ENDOSCOPIA

Número de Orden	Descripción	Punta	Color Connection
AWG2-25-260	Guía de 0.025 pulgadas (0.635 mm) y 260 cm de longitud	Recta	Púrpura
AWG2-25-450	Guía de 0.025 pulgadas (0.635 mm) y 450 cm de longitud	Recta	Púrpura
AWG2-35-205	Guía de 0.035 pulgadas (0.889 mm) y 205 cm de longitud	Recta	Púrpura
AWG2-35-260	Guía de 0.035 pulgadas (0.889 mm) y 260 cm de longitud	Recta	Azul
AWG2-35-450	Guía de 0.035 pulgadas (0.889 mm) y 450 cm de longitud	Recta	Azul

Número de Orden	Descripción	Punta	Color Connection
AWG2-25-260-A	Guía de 0.025 pulgadas (0.635 mm) y 260 cm de longitud	Angulada	Púrpura
AWG2-25-450-A	Guía de 0.025 pulgadas (0.635 mm) y 450 cm de longitud	Angulada	Púrpura
AWG2-35-205-A	Guía de 0.035 pulgadas (0.889 mm) y 205 cm de longitud	Angulada	Púrpura
AWG2-35-260-A	Guía de 0.035 pulgadas (0.889 mm) y 260 cm de longitud	Angulada	Azul
AWG2-35-450-A	Guía de 0.035 pulgadas (0.889 mm) y 450 cm de longitud	Angulada	Azul

### Contacto.

Adriana de Lourdes Dávila Morales  
Gerente de Línea  
Endoscopia - Cook Medical  
email: [adriana.davila@endomedica.com](mailto:adriana.davila@endomedica.com)  
móvil: 5990-2588



**ENDOMÉDICA**

Tecnología para la salud

Apoyando a la comunidad médica desde 1986