

# Cáteter balón de dilatación para ATP de perfil bajo


## Advance® 14 LP

El catéter balón de dilatación para ATP de perfil bajo Advance 14LP es un catéter de luz sencilla a doble con un balón cerca de su punta distal.

La parte proximal del catéter se compone de una luz acoplada a un conector Luer Lock. La parte distal del catéter se compone de dos luces independientes.

El balón está fabricado con un material de distensibilidad mínima, alta resistencia y pared ultrafina. El balón debe manipularse con especial cuidado para evitar dañarlo. Cuando se hinche empleando las recomendaciones de presión adecuadas, se obtendrán los parámetros de tamaño indicados.

La superficie del balón tiene un revestimiento hidrofílico que se vuelve resbaladizo al entrar en contacto con líquidos. El eje del interior del balón tiene marcadores radiopacos de platino-iridio que permiten la visualización del conjunto de catéter y balón mediante fluoroscopia. El catéter es compatible con guías de 0,014 pulgadas (0,36 mm).

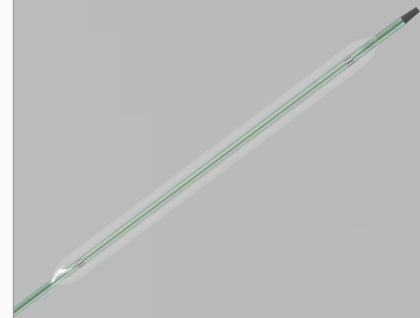

\*Longitud del Catéter 170 cm

Número de Orden	Diam. de la Guía (pulg.)	Diam. del Balón Inflado (mm)	Long. del Balón (cm)	Vaina Compatible (Fr)
PTAX4-14-170-2-2	0.014	2	2	4.0
PTAX4-14-170-2-4	0.014	2	4	4.0
PTAX4-14-170-2-6	0.014	2	6	4.0
PTAX4-14-170-2-8	0.014	2	8	4.0
PTAX4-14-170-2-12	0.014	2	12	4.0
PTAX4-14-170-2-16	0.014	2	16	4.0
PTAX4-14-170-2-20	0.014	2	20	4.0
PTAX4-14-170-2.5-2	0.014	2.5	2	4.0
PTAX4-14-170-2.5-4	0.014	2.5	4	4.0
PTAX4-14-170-2.5-6	0.014	2.5	6	4.0
PTAX4-14-170-2.5-8	0.014	2.5	8	4.0
PTAX4-14-170-2.5-12	0.014	2.5	12	4.0
PTAX4-14-170-2.5-16	0.014	2.5	16	4.0
PTAX4-14-170-2.5-20	0.014	2.5	20	4.0
PTAX4-14-170-3-2	0.014	3	2	4.0
PTAX4-14-170-3-4	0.014	3	4	4.0
PTAX4-14-170-3-6	0.014	3	6	4.0
PTAX4-14-170-3-8	0.014	3	8	4.0
PTAX4-14-170-3-12	0.014	3	12	4.0
PTAX4-14-170-3-16	0.014	3	16	4.0
PTAX4-14-170-3-20	0.014	3	20	4.0
PTAX4-14-170-4-2	0.014	4	2	4.0
PTAX4-14-170-4-4	0.014	4	4	4.0
PTAX4-14-170-4-6	0.014	4	6	4.0
PTAX4-14-170-4-8	0.014	4	8	4.0
PTAX4-14-170-4-12	0.014	4	12	4.0
PTAX4-14-170-4-16	0.014	4	16	4.0
PTAX4-14-170-4-20	0.014	4	20	4.0

### Contacto.

Diego Amigo Sordo  
Gerente de Línea  
Intervencionismo Periférico  
email: [diego.amigo@endomedica.com](mailto:diego.amigo@endomedica.com)  
oficina: 4738-8860

[www.endomedica.com](http://www.endomedica.com)



| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Guad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)

INTERVENCIONISMO  
PERIFÉRICO

**ENDOMÉDICA**

Tecnología para la salud

Apoyando a la comunidad médica desde 1986