


Cáteter balón de dilatación para ATP de perfil ultrabajo

Advance Micro® 14 LP

El catéter balón para ATP de perfil ultrabajo Advance Micro 14 es un catéter de doble luz con un balón cerca de su punta distal.

El catéter se compone de dos luces independientes, marcadas con los rótulos «DISTAL» y «BALLOON» (BALÓN). La luz distal se extiende por toda la longitud del catéter y se utiliza para la colocación de guías. La luz del balón se utiliza para hinchar el balón. La punta de la unión tiene inscritos el diámetro (mm) y la longitud (cm) del balón. El balón está fabricado con un material de distensibilidad mínima, alta resistencia y pared extrafina. El balón debe manipularse con especial cuidado para evitar dañarlo. Cuando se hinche empleando las recomendaciones de presión adecuadas, se obtendrán los parámetros de tamaño indicados. Emplee los parámetros de presión de hinchado del balón indicados en la tarjeta de distensibilidad adjunta. Consulte la etiqueta para obtener más información. Se recomienda utilizar un manómetro para vigilar las presiones de hinchado.

El eje del interior del balón tiene marcadores radiopacos de platino-iridio que permiten la visualización del conjunto de catéter y balón mediante fluoroscopia. El catéter es compatible con guías de 0,014 pulgadas (0,36 mm). La superficie del balón tiene un revestimiento hidrofílico que se vuelve resbaladizo al entrar en contacto con líquidos.

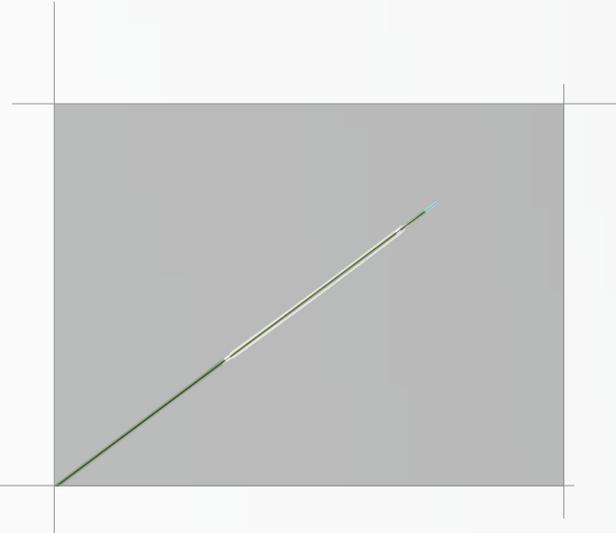

*Longitud del Catéter 50 cm

Número de Orden	Diam. de la Guía (pulg.)	Diam. del Balón Inflado (mm)	Long. del Balón (cm)	Vaina Compatible (Fr)
PTA3-14-50-1.5-2	0.014	1.5	2	3.0
PTA3-14-50-1.5-4	0.014	1.5	4	3.0
PTA3-14-50-2-2	0.014	2	2	3.0
PTA3-14-50-2-3	0.014	2	3	3.0
PTA3-14-50-2-4	0.014	2	4	3.0
PTA3-14-50-2-6	0.014	2	6	3.0
PTA3-14-50-2-8	0.014	2	8	3.0
PTA3-14-50-2-10	0.014	2	10	3.0
PTA3-14-50-2-12	0.014	2	12	3.0
PTA3-14-50-2.5-2	0.014	2.5	2	3.0
PTA3-14-50-2.5-3	0.014	2.5	3	3.0
PTA3-14-50-2.5-4	0.014	2.5	4	3.0
PTA3-14-50-2.5-6	0.014	2.5	6	3.0
PTA3-14-50-2.5-8	0.014	2.5	8	3.0
PTA3-14-50-2.5-10	0.014	2.5	10	3.0
PTA3-14-50-2.5-12	0.014	2.5	12	3.0
PTA3-14-50-3-2	0.014	3	2	3.0
PTA3-14-50-3-3	0.014	3	3	3.0
PTA3-14-50-3-4	0.014	3	4	3.0
PTA3-14-50-3-6	0.014	3	6	3.0
PTA3-14-50-3-8	0.014	3	8	3.0
PTA3-14-50-3-10	0.014	3	10	3.0
PTA3-14-50-3-12	0.014	3	12	3.0

*Longitud del Catéter 90 cm

PTA3-14-90-1.5-2	0.014	1.5	1.5	3.0
PTA3-14-90-1.5-4	0.014	1.5	4	3.0
PTA3-14-90-2-2	0.014	2	2	3.0
PTA3-14-90-2-3	0.014	2	3	3.0
PTA3-14-90-2-4	0.014	2	4	3.0
PTA3-14-90-2-6	0.014	2	6	3.0
PTA3-14-90-2-8	0.014	2	8	3.0
PTA3-14-90-2-10	0.014	2	10	3.0
PTA3-14-90-2-12	0.014	2	12	3.0
PTA3-14-90-2.5-2	0.014	2.5	2	3.0

*Longitud del Catéter 90 cm (cont.)

Número de Orden	Diam. de la Guía (pulg.)	Diam. del Balón Inflado (mm)	Long. del Balón (cm)	Vaina Compatible (Fr)
PTA3-14-90-2.5-3	0.014	2.5	3	3.0
PTA3-14-90-2.5-4	0.014	2.5	4	3.0
PTA3-14-90-2.5-6	0.014	2.5	6	3.0
PTA3-14-90-2.5-8	0.014	2.5	8	3.0
PTA3-14-90-2.5-10	0.014	2.5	10	3.0
PTA3-14-90-2.5-12	0.014	2.5	12	3.0
PTA3-14-90-3-2	0.014	3	2	3.0
PTA3-14-90-3-4	0.014	3	4	3.0
PTA3-14-90-3-6	0.014	3	6	3.0
PTA3-14-90-3-8	0.014	3	8	3.0
PTA3-14-90-3-10	0.014	3	10	3.0
PTA3-14-90-3-12	0.014	3	12	3.0

*Longitud del Catéter 150 cm

PTA3-14-150-1.5-2	0.014	1.5	2	3.0
PTA3-14-150-1.5-4	0.014	1.5	4	3.0
PTA3-14-150-2-2	0.014	2	2	3.0
PTA3-14-150-2-3	0.014	2	3	3.0
PTA3-14-150-2-4	0.014	2	4	3.0
PTA3-14-150-2-6	0.014	2	6	3.0
PTA3-14-150-2-8	0.014	2	8	3.0
PTA3-14-150-2-10	0.014	2	10	3.0
PTA3-14-150-2-12	0.014	2	12	3.0
PTA3-14-150-2.5-2	0.014	2.5	2	3.0
PTA3-14-150-2.5-3	0.014	2.5	3	3.0
PTA3-14-150-2.5-4	0.014	2.5	4	3.0
PTA3-14-150-2.5-6	0.014	2.5	6	3.0
PTA3-14-150-2.5-8	0.014	2.5	8	3.0
PTA3-14-150-2.5-10	0.014	2.5	10	3.0
PTA3-14-150-2.5-12	0.014	2.5	12	3.0
PTA3-14-150-3-2	0.014	3	2	3.0
PTA3-14-150-3-3	0.014	3	3	3.0
PTA3-14-150-3-4	0.014	3	4	3.0
PTA3-14-150-3-6	0.014	3	6	3.0
PTA3-14-150-3-8	0.014	3	8	3.0
PTA3-14-150-3-10	0.014	3	10	3.0
PTA3-14-150-3-12	0.014	3	12	3.0

Contacto.

Diego Amigo Sordo
Gerente de Línea - Intervencionismo Periférico
email: diego.amigo@endomedica.com
oficina: 4738-8860

www.endomedica.com

| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Guad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)

INTERVENCIONISMO
PERIFÉRICO