

Catéteres Balón

CODA®


Los catéteres balón Coda y Coda LP constan cada uno de dos luces independientes. La luz «Distal» (distal) extiende la longitud del catéter y se emplea para la colocación sobre guías. La luz «Balloon» (del balón) se emplea para hinchar y deshinchar el balón.

El balón está hecho de un material de poliuretano distensible. El balón debe manipularse con especial cuidado para evitar dañarlo. Si se siguen las recomendaciones de volumen adecuadas para hinchar el balón, se obtendrán los parámetros de tamaño indicados.

El catéter balón incluye bandas radiopacas que ayudan en la colocación del dispositivo bajo guía fluoroscópica.

INDICACIONES

Los catéteres balón Coda y Coda LP están indicados para la oclusión temporal de grandes vasos, o para la expansión de prótesis vasculares.

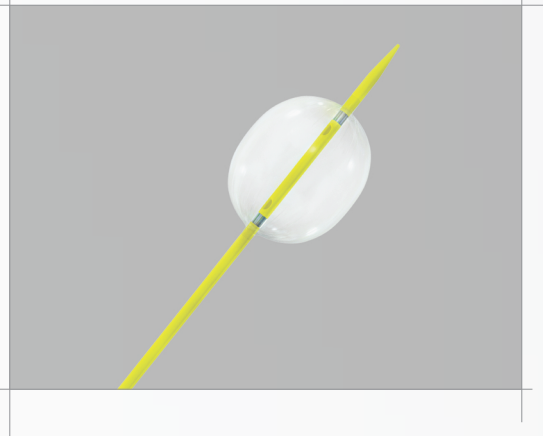

Número de Orden	Fr / Longitud del Catéter (cm)	Fr del Introdutor Recomendado	Acepta guías con Diámetro (pulg)
CODA-2-9.0-35-100-32	9/100	12	.035
CODA-10.0-35-120-40	10/140	14	.035

INTERVENCIONISMO
AÓRTICO



Ayorando a la comunidad médica desde 1986

Contacto.

Mauricio Díaz Bello
Gerente de Ventas
Intervencionismo Aórtico
email: mauricio.diaz@endomedica.com
móvil: 5990-2605



www.endomedica.com

| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Guad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)