

Coloque stents biliares con
una precisión sin precedentes.




Evolution® Biliary
STENT DE LIBERACIÓN CONTROLADA



www.cookmedical.com


Diseño «evolucionario»

Para el tratamiento paliativo de las vías biliares, se necesita un stent que facilite una colocación precisa, mantenga la permeabilidad y reduzca al mínimo la migración. Nuestro stent ofrece las tres cosas.

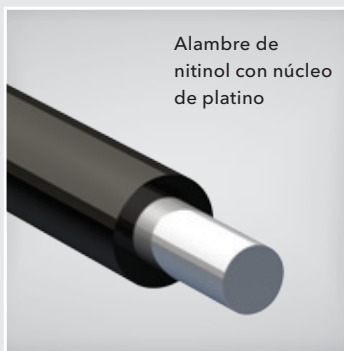

Colocación exacta del stent


- El stent de nitinol con acortamiento Evolution tiene un alma de platino dedicada que ofrece una excelente radiopacidad en toda su longitud.⁴
- Los stents parcial y totalmente recubiertos también incorporan un innovador lazo de agarre amarillo que permite recolocar inmediatamente o extraer por completo el stent si fuera necesario durante el procedimiento.

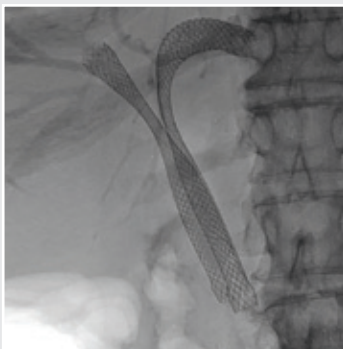

3.

Permeabilidad maximizada para reducir el número de reintervenciones

- Con su configuración de celdillas, el diseño de trama sin recubrimiento del Evolution reduce potencialmente el crecimiento tumoral hacia el interior.
- Nuestros stents Evolution parcial o totalmente recubiertos tienen un revestimiento interior y exterior de silicona. El resultado es un stent con una capacidad óptima de prevención del crecimiento hacia el interior.
- Las fuerzas radial y axial son las más favorables para el sistema biliar, lo que hace que el stent conserve la flexibilidad y la adaptabilidad a la forma de los conductos, a la vez que se mantienen permeables las vías biliares.

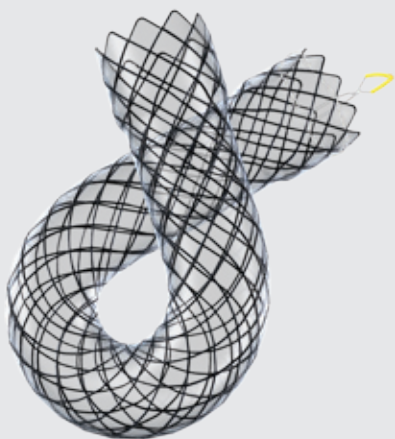

Reducción al mínimo de la migración


- Los rebordes de dos escalones aseguran la posición del stent tras el despliegue.

3. Imagen cortesía del Prof. Marco Bruno, Centro Médico Erasmus, Rotterdam (Países Bajos).


4. Nota: los stents se acortan un máximo de solamente un 38 %. Datos archivados en Cook Ireland.

Precisión «evolucionaria»


La empujabilidad maximizada y el estiramiento mínimo que ofrece la tecnología Flexor® Plus con patente en trámite de Cook permite colocar el stent en la posición exacta necesaria.

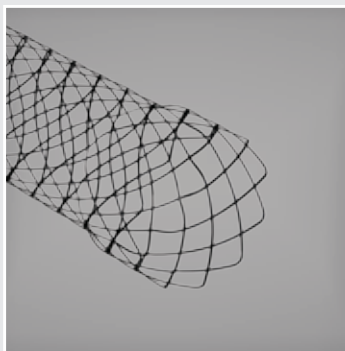


Sin recubrimiento

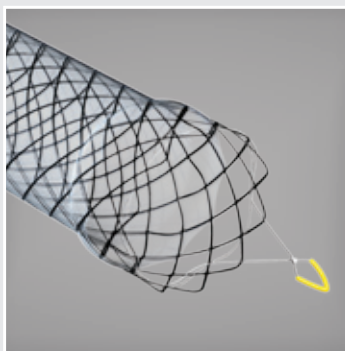


Parcialmente recubierto

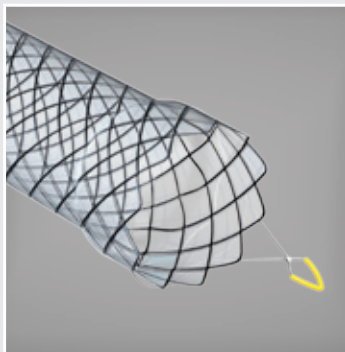

Totalmente cubierto

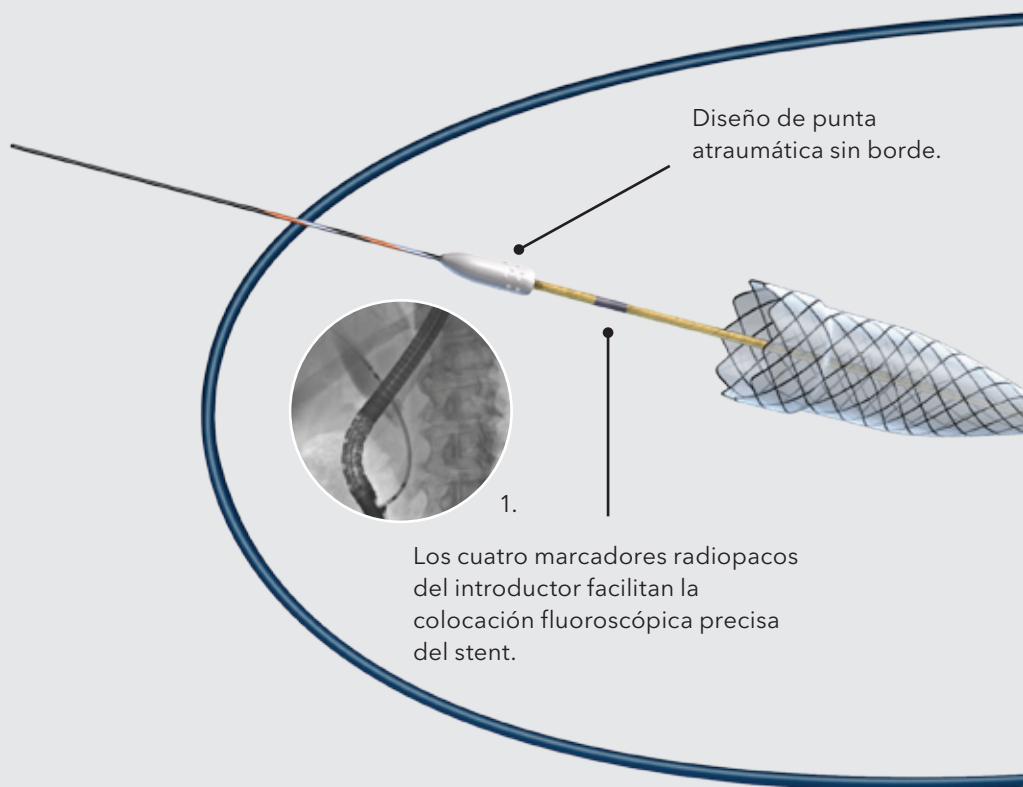

La empujabilidad maximizada se consigue con un estiramiento mínimo, gracias a la tecnología Flexor Plus con patente en trámite de Cook.


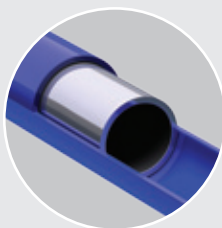


El marcador amarillo, claramente visible a través del catéter Flexor transparente, facilita la colocación endoscópica transpapilar precisa del stent.



2.

Liberación controlada: cada vez que se aprieta el gatillo se despliega o se recaptura una cantidad proporcional del stent.

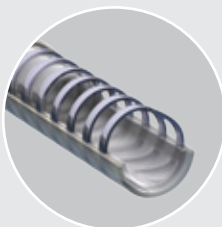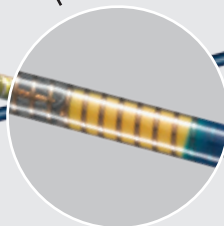

Excelente flexibilidad y estabilidad sin acodamiento en la unión crucial situada cerca del extremo proximal del stent gracias al diseño del catéter Flexor en espiral.

Al incorporar la tecnología Fusión®, este sistema ofrece la capacidad de utilizar la técnica de monorraíl con un alambre largo o corto a través del orificio para intercambio.

Control «evolucionario»

El único sistema de implantación de stents del mercado que incorpora liberación controlada y posibilidad de recaptura reales mediante nuestro sistema de despliegue con gatillo.



1. Imagen cortesía del Prof. Marco Bruno, Centro Médico Erasmus, Rotterdam (Países Bajos).
2. Imagen cortesía del Prof. Horst Neuhaus, EVK, Düsseldorf (Alemania).

Especificaciones del producto

Este dispositivo se utiliza para el tratamiento paliativo de neoplasias malignas del árbol biliar. Este dispositivo se suministra estéril y está indicado para un solo uso.

Referencia	Referencia de producto	Diámetro del cuerpo (mm)	Diámetro del reborde (mm)	Longitud del stent (cm)	Diámetro del sistema de implantación (Fr)	Canal de accesorio mínimo (mm)
Sin recubrimiento						
G23123	EVO-8-9-4-B	8	9	4	8,5	3,2
G23124	EVO-8-9-6-B	8	9	6	8,5	3,2
G23125	EVO-8-9-8-B	8	9	8	8,5	3,2
G23126	EVO-8-9-10-B	8	9	10	8,5	3,2
G23127	EVO-10-11-4-B	10	11	4	8,5	3,2
G23128	EVO-10-11-6-B	10	11	6	8,5	3,2
G23129	EVO-10-11-8-B	10	11	8	8,5	3,2
G23130	EVO-10-11-10-B	10	11	10	8,5	3,2
Parcialmente recubierto						
G23136	EVO-PC-8-9-6-B	8	9	6	8,5	3,2
G23137	EVO-PC-8-9-8-B	8	9	8	8,5	3,2
G23138	EVO-PC-10-11-4-B	10	11	4	8,5	3,2
G23139	EVO-PC-10-11-6-B	10	11	6	8,5	3,2
G23140	EVO-PC-10-11-8-B	10	11	8	8,5	3,2
Totalmente cubierto						
G23131	EVO-FC-8-9-6-B	8	9	6	8,5	3,2
G23132	EVO-FC-8-9-8-B	8	9	8	8,5	3,2
G23133	EVO-FC-10-11-4-B	10	11	4	8,5	3,2
G23134	EVO-FC-10-11-6-B	10	11	6	8,5	3,2
G23135	EVO-FC-10-11-8-B	10	11	8	8,5	3,2

Advertencia: se desconocen la seguridad y la eficacia del uso de este dispositivo en el sistema vascular.

Customer Service

EMEA: EDI - www.cookmedical.com/edi.do
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001633, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

www.cookmedical.com

Americas: EDI - www.cookmedical.com/edi.do
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
E-mail: orders@cookmedical.com

Australia:
Phone: +61 738411188, 1800777222, Fax: +61 738411288, 1800077283
E-mail: cau.custserv@cookmedical.com

