


Catéter para colangiografía de Fanelli

El catéter para colangiografía de Fanelli tiene una punta distal flexible con bordes suaves no traumáticos que facilitan el paso del catéter al conducto cístico.

La guía integrada permite el paso del catéter en conductos difíciles, pequeños o tortuosos.

Las marcas centimetradas proporcionan un posicionamiento preciso.

El adaptador de tres vías permite utilizar simultáneamente y sin interrupciones solución salina para enjuague, medio de contraste para colangiografía y una guía, con lo que se reduce el riesgo de introducción de aire.

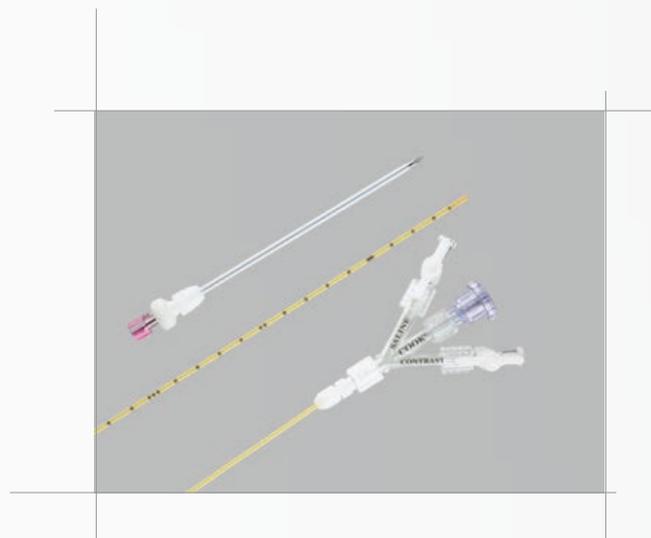

El catéter de colangiografía Fanelli está indicado para la evaluación diagnóstica de los conductos biliares durante una colecistectomía laparoscópica.

CIRUGÍA

Número de Orden	Catéter Fr	DI Interno del Catéter (pulg)	DI Cable Guía (pulg)	Long. del Cable Guía (cm)
C-FCC-100	5.0	.044	.021	90

C-FCC-200	5.0	.044		
-----------	-----	------	--	--

*Sin la guía

Contacto.

Izchel Lugo Aguirre
Gerente de Línea Cuidados Críticos, Cirugía
Urología y Terapia de Ondas de Choque
email: izchel.lugo@endomedica.com
móvil: 5990-2700