


Dispositivo hemostático endoscópico

Hemospray®

Hemospray es una mezcla mineral en polvo desarrollada específicamente para la hemostasia endoscópica. No contiene proteínas humanas ni animales, ni sustancias vegetales, y no tiene alérgenos conocidos.

Hemospray es metabólicamente inerte y se considera no tóxico, tanto sistémicamente como en cualquier otro sentido.

El Hemospray funciona entrando en contacto con una zona donde hay una hemorragia activa, el polvo absorbe el agua y actúa como un agente cohesivo y adhesivo formando una barrera mecánica sobre la zona de la hemorragia. Es un método endoscópico diferente que se ha probado con éxito en una gran variedad de procedimientos hemostáticos del tracto GI superior no relacionados con varices.

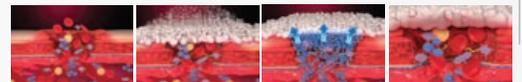

Hemospray, a diferencia de las terapias tradicionales, es un producto no térmico, no traumático y sin contacto que no requiere la precisión en la aplicación de otros dispositivos endoscópicos. Esto significa:

- **No térmico:** no se producen cambios en el tejido, como sucede a veces con los tratamientos térmicos.
- **No traumático:** como no se aplica fuerza en la zona del tratamiento, el polvo reduce al mínimo el riesgo de traumatismo tisular que presentan otros métodos.
- **Sin contacto:** el sistema de aplicación mediante aerosol suprime la necesidad de que haya fuerzas mecánicas o de contacto que actúen directamente en la zona tratada.
- **Aplicación no precisa:** el polvo se aplica dirigiéndolo hacia el origen de la hemorragia, por lo que no hace falta el acercamiento directo y la precisión que requieren los tratamientos convencionales.

Número de Orden	Descripción	Canal de accesorios mínimo
HEMO-7	Catéter de 7 Fr y 220 cm	2.8 mm
HEMO-10	Catéter de 10 Fr y 220 cm	3.7 mm

Contacto.

Adriana de Lourdes Dávila Morales
Gerente de Línea
Endoscopia - Cook Medical
email: adriana.davila@endomedica.com
móvil: 5990-2588



ENDOSCOPIA

