



FICHA TÉCNICA

Solución para el manejo avanzado y tratamiento de heridas.

SilverStream®

La solución SilverStream® limpia, hidrata y acelera el proceso natural de curación de las heridas crónicas y difíciles de tratar; libre de efectos secundarios y efectivo.

Destrucción de biopelículas y control de infecciones

SilverStream® está indicado para la limpieza y el tratamiento de escaras excesivas, del biofilm y la carga microbiana en heridas crónicas infectadas y en quemaduras.



Componentes de la Solución Silverstream®

SilverStream® frasco 250 ml contiene:

COMPONENTES	No. CAS	CONCENTRACIÓN	PAPEL
Glicerol	56-81-5	3 - 15%	Hipertónico Propiedad Agente Calmate
Tris buffer	77-86-1	10 - 100mM	pH buffer
Mentol	89-78-1	0.05 - 0.5%	· Mejorar Penetración · Agente calmante · Promotor crecimiento · Combate el olor
Tween20	9005-64-5	0.5% - 5%	Tensioactivo y detergente
AgNO ₃	7761-88-8	0.01% (WN)	Agente antimicrobiano y preservativo
Ácido acético glacial	64-19-7	Para alcanzar un pH final de 7.45	Valoración pH
Agua (purificada)	7732-18-5	Para alcanzar un volumen final de 250 mL	Solvente

PRESENTACIONES:

Referencia	Presentación
SS-1000-01	Solución Silverstream 250 ml
SS-1000-02	Solución Silverstream 100 ml
SS-1000-03	Solución Silverstream 500 ml

Beneficios de la Solución Silverstream®

 Reactiva la curación inmediata Realiza desbridamiento autolítico, reduce la información, promueve la angiogénesis y estimula la granulación tisular.	 Promueve y equilibra la humedad Penetra más profundamente en la superficie de la herida, facilita la absorción y reduce los exudados, previene la maceración.	 Fuerte eficacia antimicrobiana Destruye la biopelícula, previene la reinfección, no genera resistencia bacteriana, inhibe el crecimiento de bacterias, levaduras y hongos.	 Efecto calmante durante el tratamiento Reduce el dolor y elimina el olor, mejora el aspecto y la apariencia de la piel; reduce la tensión superficial.	 Eficacia y seguridad comprobadas No tóxico, no citotóxico, sin argiría, sin colorantes ni tintaciones.
---	---	--	--	---



Este producto debe ser prescrito por un profesional de la salud y utilizado bajo supervisión médica.

Modo de Empleo



Paso 1.
Abra la tapa, inserte la jeringa con la aguja en el frasco y extraiga la cantidad de solución SilverStream según lo indicado por el médico.



Paso 2.
Rocíe la solución SilverStream sobre la herida. Deje la herida expuesta a la solución rociada de 5 a 10 minutos. No enjuague. Si es necesario, use una gasa empapada en SilverStream para limpiar suavemente la herida.
No inyectar (la aguja no debe tocar la herida)




Paso 3.
Humedezca una gasa de algodón estéril con la solución SilverStream. Colóquela sobre la herida.



Paso 4.
Cubra la herida con un apósito oclusivo secundario seco no antimicrobiano, como una almohadilla con borde adhesivo o una venda, según las indicaciones del médico.

CONOZCA MÁS DE NOSOTROS
ESCANEO EL CÓDIGO QR

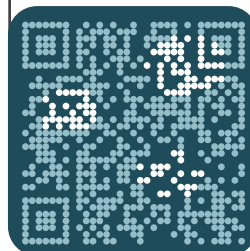

ENDOMÉDICA S.A. DE C.V.

Unidad de Cuidado de Heridas
Monte Irazú 189 Col. Lomas de Chapultepec
Miguel Hidalgo CDMX 11000

· tel. 55 4738 8800 (CDMX) | 81 8123 2499 (Mty.) | 33 2002 7700 (Guad.) | 222 419 7189 (Pue.)
· ventas@endomedica.com

www.endomedica.com

