


# Balón de 3 etapas dirigido con guía Hercules®

Con la extraordinaria fuerza radial que ejerce en el lugar de la estenosis, el Hercules marca una nueva pauta en la dilatación esofágica. Nuestra tecnología exclusiva en P.E.T. Flex™ genera mayor fuerza radial con presiones iguales o menores que los dispositivos de la competencia.

- El catéter de evacuación rápida y la vaina de deshinchado rápido (Rapid Deflation Sleeve), con patente en trámite, permiten deshinchar rápidamente el balón\*
- El catéter de nitinol resistente a los acodamientos aporta maniobrabilidad
- La punta atraumática flexible facilita el acceso a través de estenosis muy estrechas
- La excelente visualización a través del balón permite ver el progreso de la dilatación
- La información sobre el tamaño y el hinchado incluida en el envase y en las etiquetas del catéter es fosforescente, lo que permite una fácil identificación
- El balón prelubricado facilita la extracción a través del canal de accesorios

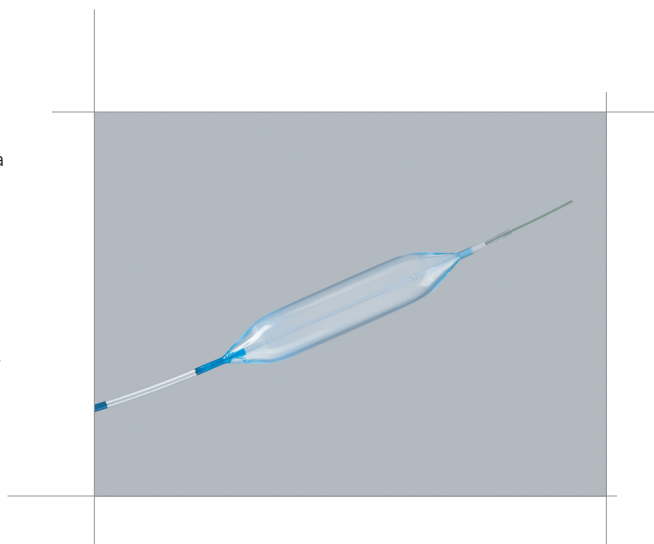

\* El Balón sólo puede inflarse sólo con agua empleando una jeringa de 60 ml.

Número de Orden	Descripción	Presión atm/psi (kPa)
HBD-W-8-9-10	Diámetro del balón hinchado: 8-9-10 mm y 24-27-30 Fr; longitud del balón: 5,5 cm; longitud de la guía: 300 cm	4-6-8 60-90-120 (414-621-827)
HBD-W-10-11-12	Diámetro del balón hinchado: 10-11-12 mm y 30-33-36 Fr; longitud del balón: 5,5 cm; longitud de la guía: 300 cm	2-4-6 30-60-90 (207-414-621)
HBD-W-12-13.5-15	Diámetro del balón hinchado: 12-13,5-15 mm y 36-40,5-45 Fr; longitud del balón: 5,5 cm; longitud de la guía: 300 cm	2-4-6 30-60-90 (207-414-621)
HBD-W-15-16.5-18	Diámetro del balón hinchado: 15-16,5-18 mm y 45-49,5-54 Fr; longitud del balón: 5,5 cm; longitud de la guía: 300 cm	2-4-6 30-60-90 (207-414-621)
HBD-W-18-19-20	Diámetro del balón hinchado: 18-19-20 mm y 54-57-60 Fr; longitud del balón: 5,5 cm; longitud de la guía: 300 cm	2-4-6 30-60-90 (207-414-621)

## Contacto.

Adriana de Lourdes Dávila Morales  
Gerente de Línea  
Endoscopia - Cook Medical  
email: adriana.davila@endomedica.com  
móvil: 5990-2588



## ENDOSCOPIA

**ENDOMÉDICA**  
Tecnología para la salud

Apoyando a la comunidad médica desde 1986

www.endomedica.com

| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Guad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)