

Equipo para Neumotórax Wayne

Para el alivio de neumotórax simples, espontáneos, iatrogénicos y a tensión. El catéteres de poliuretano radiopaco.

El equipo para neumotórax Wayne modificado, se compone de una o varias agujas introductoras, una guía de acero inoxidable, un dilatador del tamaño adecuado, un catéter de poliuretano radiopaco, un tubo conector de PVC, una llave de paso de plástico de tres vías y una válvula de drenaje torácico Cook sin látex, que se utiliza para evacuar aire o líquidos.


- La versión con trocar incluye obturador de aguja, válvula de drenaje torácico Cook, tubo de conexión y llave de paso de una vía.
- La versión de colocación con técnica de Seldinger incluye aguja, guía, dilatador, válvula de drenaje torácico Cook, tubo de conexión y llave de paso de una vía.

El equipo para neumotórax Wayne modificado está indicado para el alivio de neumotórax simples, espontáneos, iatrogénicos y a tensión.

No se recomienda utilizar este producto en casos de grandes acumulaciones de líquido o de hemotórax.



C-UTPT-1020-WAYNE-IMH
C-UTPT-1400-WAYNE-IMH

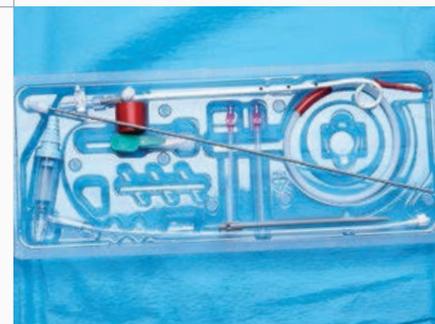

C-UTPTY-1400-WAYNE-112497-IMH

CUIDADOS CRÍTICOS

| Número de Orden | Tamaño French del catéter | Longitud del catéter (cm) | Orificios laterales del catéter | Calibre G de la aguja | Longitud de la aguja (cm) |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| C-UTPT-1020-WAYNE-IMH | 10.2 | 29 | 20 | 19 | 16.5 |
| C-UTPT-1400-WAYNE-IMH | 14.0 | 29 | 20 | 19 | 16.5 |
| Colocación con trocar | | | | | |
| Número de Orden | Tamaño French del catéter | Longitud del catéter (cm) | Orificios laterales del catéter | Calibre G de la aguja | Longitud de la aguja (cm) |
| C-UTPT-1400-WAYNE-112497-IMH | 14.0 | 29 | 19 | 18 | 5 |
| Colocación con la técnica de Seldinger | | | | | |

Equipo de trocar

- Obturador de aguja
- Catéter pigtail
- Válvula de drenaje torácico Cook

Equipo Seldinger

- Aguja introductora ecogénica EchoTip® de 5 cm
- Aguja introductora de 9 cm
- Guía
- Dilatador
- Obturador de catéter
- Catéter pigtail
- Válvula de drenaje torácico Cook

Contacto.

Izchel Lugo Aguirre
Gerente de Línea Cuidados Críticos, Cirugía Urología y Terapia de Ondas de Choque
email: izchel.lugo@endomedica.com
móvil: 5990-2700

