


Extensor de Cables Bulldog®

El extensor de cables Bulldog ayuda a extraer los cables de derivación cardíaca sin lumen o aquellos que contienen guías del conductor de cables, como los cables desfibriladores cardioversores implantables (DCI). Bulldog permite extender el cable de manera tal que se pueda colocar en una vaina. Después de que el lazo se desliza sobre el extremo del cable o los conductores del cable, el manguito metálico se inserta sobre el lazo para sujetar el cable de manera fija y facilitar la extracción.

Características:

- Mecanismo de fijación seguro y fácil de usar
- Compatibilidad con todos los equipos de vainas dilatadoras de Cook
- Mango roscado

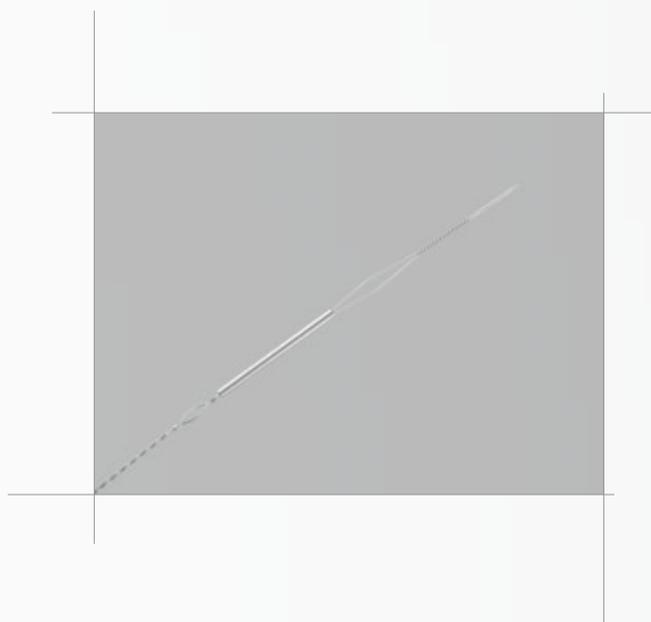

EXTRACCIÓN DE
CABLES DE
MARCAPASOS

Número de Orden	Longitud Total (cm)
LR-LED01	70

Contacto.

Paola Morales
Gerente de Línea
Lead Management - Cook Medical
email: paola.morales@endomedica.com
móvil: 3028-3901

