


Equipo Bloqueador Endotraqueal ARNDT

El equipo bloqueador endobronquial Arndt está diseñado para utilizarse con un tubo endotraqueal estándar y un broncoscopio de fibra óptica de pequeño diámetro (pediátrico) para aplicar ventilación unipulmonar.

El bloqueador endobronquial utiliza un sistema de guía con lazo que se coloca a través de la luz del bloqueador endobronquial y sale por el extremo distal de éste para formar un pequeño lazo ajustable. Este sistema puede hacerse avanzar o retraerse en el extremo proximal del bloqueador endobronquial para aumentar o disminuir el tamaño del lazo.

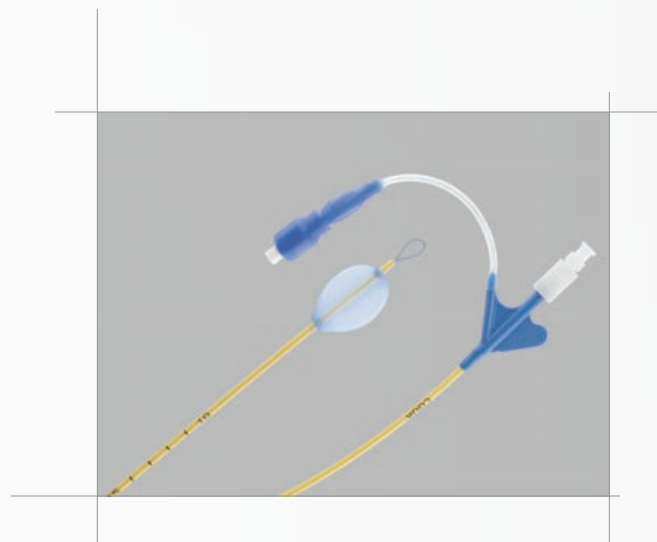

El equipo bloqueador endobronquial Arndt está diseñado para intubar diferencialmente uno de los bronquios de un paciente para aislar el pulmón izquierdo o derecho en procedimientos que precisen ventilación unipulmonar.

Número de Orden	Tamaño mínimo recomendado (ETT*)	Catéter	Catéter (cm)
C-AEBS-5.0-50-SPH	4.5	5	50
C-AEBS-9.0-78-SPH	7.5	9	78

Contacto.

Izchel Lugo Aguirre
Gerente de Línea Cuidados Críticos, Cirugía
Urología y Terapia de Ondas de Choque
email: izchel.lugo@endomedica.com
móvil: 5990-2700



CUIDADOS CRÍTICOS



Apoiando a la comunidad médica desde 1986