


Catéteres de intercambio para vía aérea de Cook

(con adaptadores Rapid-Fit®)

El catéter de intercambio para vía aérea de Cook es un catéter radiopaco de punta roma con marcas de centímetros que facilitan la colocación. El catéter se suministra con un adaptador Rapi-Fit (con un conector de 15 mm o un conector Luer Lock), que permite utilizar dispositivos de ventilación durante el procedimiento de intercambio.

- El uso de adaptadores extraíbles Rapi-Fit permite utilizar un dispositivo de ventilación si es necesario durante el procedimiento de intercambio. Adaptadores para conexiones de chorro y de 15 mm.
- El diseño del catéter, con luz en toda su longitud y orificios laterales distales, garantiza un flujo de aire adecuado.
- La punta roma del catéter no produce traumatismos en las estructuras internas.
- Las marcas de centímetros facilitan la colocación precisa con tubos endotraqueales acortados.

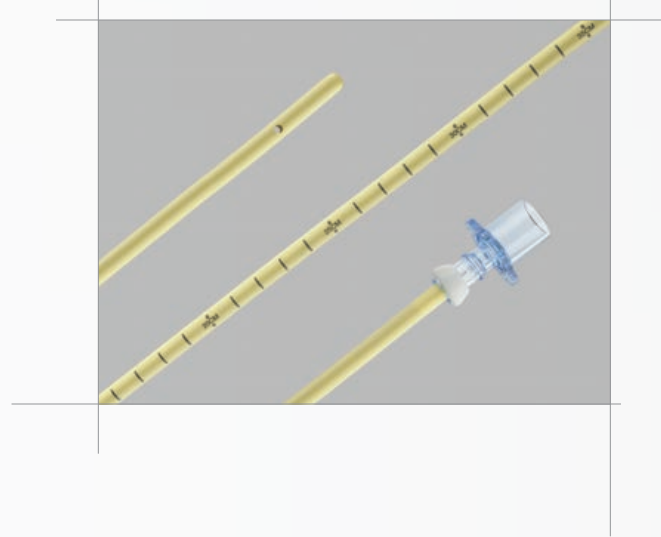

El catéter de intercambio para vía aérea de Cook está indicado para el intercambio fácil y atraumático de tubos endotraqueales.

Número de Orden	FR Catéter	Long. del Catéter (cm)	DI del Catéter (cm)	Para repuesto de los Tubos ET con DI (mm)
C-CAE-8.0-45	8.0	45	1.6	3 o mayor
C-CAE-11.0-83	11.0	83	2.3	4 o mayor
C-CAE-14.0-83	14.0	83	3.0	5 o mayor
C-CAE-19.0-83	19.0	83	3.4	7 o mayor

Contacto.

Izchel Lugo Aguirre
Gerente de Línea Cuidados Críticos, Cirugía Urología y Terapia de Ondas de Choque
email: izchel.lugo@endomedica.com
móvil: 5990-2700



CUIDADOS CRÍTICOS



Apoyando a la comunidad médica desde 1986